


Bio MAb 和 Bio IEX

分析到高效制备


- 非多孔颗粒可消除传质，并提供最高效率以纯化即使密切相关的杂质
- 五种官能团：SAX、WAX、SCX、WCX 和 CX，专门针对 mAb 进行了优化，可提供最大的分离度以增加样品载量
- 使用相同的 5 μm 颗粒从分析级放大至半制备级和制备级

这些颗粒上的外部亲水层减少了非特异性相互作用，并实现了较高的样品回收率。


使用填充有相同 5 μm 颗粒的分析柱、半制备柱和制备柱，可快速纯化生物制药工艺开发过程中发现的任何意外的电荷异构体，以进行进一步的表征和鉴定。

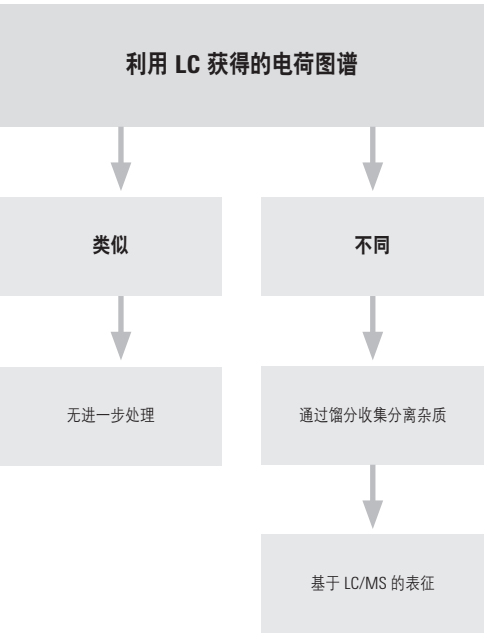

Bio MAb 填料

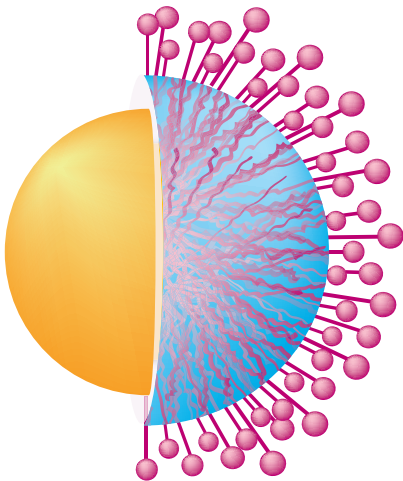

Bio IEX 填料

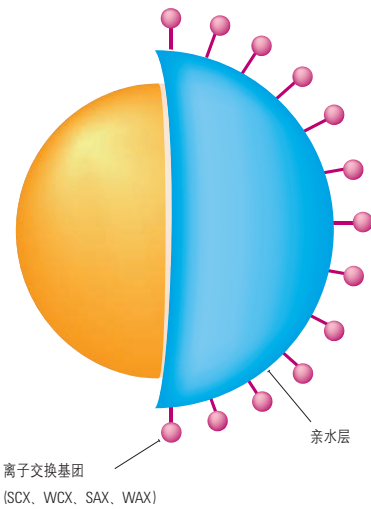

Bio MAb HPLC 色谱柱

规格 (mm)	填料粒径 (μm)	部件号
21.2 × 250	5	5190-6885
10 × 250	5	5190-6884

Bio IEX HPLC 色谱柱，不锈钢

规格 (mm)	填料粒径 (μm)	Bio SCX 部件号	Bio WCX 部件号	Bio SAX 部件号	Bio WAX 部件号
21.2 × 250	5	5190-6879	5190-6881	5190-6883	5190-6877
10 × 250	5	5190-6878	5190-6880	5190-6882	5190-6878

**技巧和工具**

可以将 Agilent BioHPLC 色谱柱与 InfinityLab Quick Connect 快速连接接头和无金属的生物惰性毛细管连接。

了解更多信息：www.agilent.com/chem/5991-7469EN